

Masszírozó pisztoly Lafe 3200 RPM 1800 mAh


Használati útmutató



Kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg a következőket a jövőbeni használatra, hogy biztosítsa a lámpa kielégítő és biztonságos működését.

A csomag tartalma:

- Masszírozó pisztoly
- USB kábel
- Használati útmutató
- 4 masszázsféj

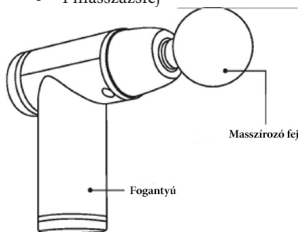

A masszázspisztoly a feszült izmok ellazítására, valamint a keringési rendszer működésének javítására szolgál. A készüléket főleg profi sportolók választották, akik gyakran szenvednek sérülésektől, és rehabilitációs klinikákon használják. Mostanra azonban egyre népszerűbb önmasszázs eszközként. A készülék 8 masszázsszintenzitási fokozattal rendelkezik, és úgy tervezték, hogy jól át tudja mozgatni a fájó és feszes izmokat. A készlet a következő masszázsféjeket tartalmazza:

	Lapos fej - kompakt szerkezetű, legmélyebb izomszövetek masszírozására ajánlott, pl. a comb mellkasi vagy négyfejű izmai
	Kerek fej - teljes testmasszázsához használatos, univerzális fej. Könnyen elérhető helyekre tervezték, pl.: combok, karok
	Villa alakú fej - alkalmas a gerinc terület masszírozására, valamint hosszú és keskeny izmokhoz is, pl. vádli izomzat
	Golyó alakú fej – a fejek közül a legpontosabb, hatékony a nehezen elérhető helyeken. Pontos masszázshoz ajánlott


A termék feltöltése

A töltéshez használja a csomagban található eredeti kábelt.


A tápegység kimeneti feszültségének 5 V-nak kell lennie. Amikor a termék töltődik, az USB-C bemenet alatt található akkumulátorjelző pirosan villog, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zölden világít.

Használati utasítások

1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és kövesse az utasításokat
2. Vegye ki a terméket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Az első bekapcsolás előtt csatlakoztassa a készüléket a töltéshez 3 órára. 3 óra elteltével válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és kövesse a kézikönyv további utasításait.
3. Válassza ki a használni kívánt fejet, és helyezze be a készülékbe az alábbiak szerint:

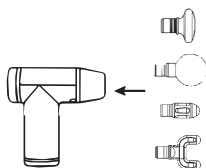

4. A masszázsféj visszahelyezéséhez fogja meg a fejet a készüléken, és húzza meg az alábbi képen látható módon:

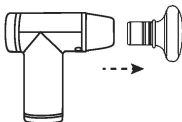

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához
6. A masszírozó 8 masszázsszintenzitási fokozattal rendelkezik. Amikor a készülék már be van kapcsolva, ugyanazt a gombot röviden megnyomva állíthatja be az intenzitást: be / ki



bekapcsolás / kikapcsolás

A készülék bekapcsolása után a masszírozó a legalacsonyabb intenzitáson lesz: Minden alkalommal, amikor újra megnyomja a gombot, az intenzitási szint magasabbra ugrik. A gomb körül 8 jelzőpont található, amelyek a kiválasztott intenzitást mutatják. Ha bekapcsolás után 7-szer megnyomja a készüléket, az üzemmód visszaáll az 1. szintre. Nagyon fontos, hogy a masszázs megkezdése előtt nyitott kézzel ellenőrizze az intenzitási szintet.

MEGJEGYZÉS: A masszírozó felgyorsul, ha a testéhez nyomja. Ha nem gyorsul, az azt jelenti, hogy a fejet túl gyengéden helyezi a testéhez. Ha megfelelő intenzitási szintet talál, továbbléphet a következő pontra.

Fogja meg teljes kézzel a masszírozó fogantyúját, és tekerje a fogantyú köré az ujjait.

7. Használja a készüléket úgy, hogy a fejét a kiválasztott testrészeire helyezi. Növelje / csökkentse az intenzitást az Ön kényelmének megfelelően.

A kiválasztott testrésztől függően a készüléket a helyén tarthatja, vagy finoman mozgathatja a fejet a kiválasztott területen, pl. A vállak, combok, vádli mentén stb.

A nehéz helyek, például a hát eléréséhez egy másik személy segítségére lesz szükség a masszázs elvégzéséhez.

VIGYÁZAT:

1. Egyeszerre ne végezzen 10 percnél hosszabb pontmasszázszt ugyanazon a területen/izomcsoporton. Az ajánlott idő 1-2 perc.
2. Javasoljuk a masszázs használatát edzés után, soha ne edzés közben vagy közvetlenül edzés előtt.